

# CAMA

## ALDRYS ALZHEIMER

ESTE PRODUTO CUMPRE OS REQUISITOS DISPOSTOS PELA DIRETIVA EUROPEIA 93/42/CEE. FOI CONCEBIDO E FABRICADO CONFORME A NORMA VIGENTE CE 60601-2-52

- **Amplitude insuperável: 22 a 78 cm**  
Segura para os pacientes, confortável para os cuidadores.
- **Espaço debaixo da cama** graças à nova curvatura das travessas.
- **Robusta** pelos materiais utilizados e a motorização LINAK, com garantia de 5 anos.
- **Estética e conforto:** painéis em várias cores ou acolchoados para proporcionar aos pacientes uma referência visual e uma segurança adicional contra golpes.



*Cama com painéis Carmen II. Cor especial.*

A dependência das pessoas idosas pode evoluir...  
... as nossas camas também


## ETAPA Nº1: ESCOLHA A BASE DA CAMA DE ACORDO COM A ALTURA VARIÁVEL



Batente de parede incluído (de série)



## EASY MOVE

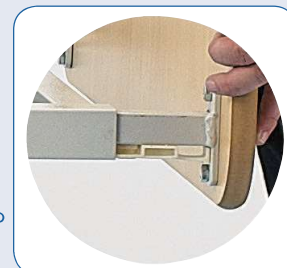


Fixação dos painéis por meio do sistema EASY MOVE: simples, rápido e seguro.

## ETAPA Nº2: ESCOLHA A CONFIGURAÇÃO DA CAMA



O ELEVADOR de encosto: estão disponíveis diferentes versões de elevadores de encosto.



Elevador de encosto elétrico (padrão).

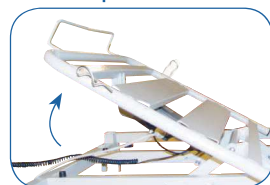

Elevador de encosto com translação, Permite evitar o deslizamento para frente.

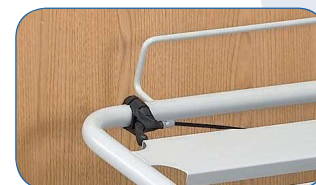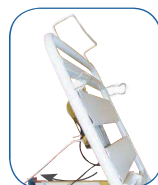

Elevador de encosto com descida de emergência. Acessível na cabeceira e aos dois lados da cama.


## O ELEVADOR PARA PERNAS:



Elevador para pernas com dobra para os joelhos.



## O SOMMIER

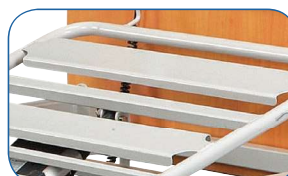

Lâminas metálicas largas e soldadas. Concebidas para uma fácil manutenção

## O TRAVÃO



Rodas Ø75 mm

Travão independente em cada roda da cama



Os pedais do tipo "borboleta" localizam-se nas 2 rodas ao pé da cama  
Rodas Ø 100 mm

## ACESSÓRIOS



Extensão de sommier de 20 cm



Tomada equipotencial

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	PESO DA CAMA	EE*	ELEVADOR DE PERNAS	CARGA NORMAL DE UTILIZAÇÃO	RODAS	NORMAS	ESTANQUEIDADE
<b>ALDRYS ALZHEIMER</b> 3 funções elétricas com dobra para os joelhos Ref. IAL5L08075de	90 x 200 cm Sommier divisível	87 kg Sem acessórios nem painéis	até 70°	Dobra para os joelhos 26° y 16° Ajuste dos pés por cremalheira	170 kg Colchão 20 kg Paciente 135 kg Acessórios 15 kg	Ø 75 mm com travão independente Ø 100 mm travão centralizado	CEI 60601-2-52	Motorização e caixa LINAK IP66  Botoeira LINAK IP54

\* EE = Elevador de encosto

- 2 suportes para acessórios (nas longarinas)
- 2 suportes do tipo haste com porta-gotejador (na cabeceira da cama)
- 2 suportes do tipo haste integrados (na cabeceira da cama)



Garantia mecânica, elétrica e da botoeira 5 anos.\*

Garantia dos painéis e acessórios 1 ano.\*

\*Em condições normais de utilização e exceto peças de desgaste, ver as instruções de utilização.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España

Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.