

# COLCHÓN EN ESPUMA VISCOELÁSTICA


## **ALOVA**<sup>®</sup>

Monobloc, multizona  
**con descarga del talón**



### DESCARGA DEL TALÓN INTEGRADA

- **Funcionalidad:** disminución de los valores de presión por diferentes firmezas adaptadas a cada zona del cuerpo.
- **Eficacia:** ayuda al tratamiento de escaras de nivel 1 y 2. Mejora del flujo vascular a nivel del talón por inclinación integrada en la zona de los pies.
- **Seguridad:** reducción al mínimo de riesgo por una protección integral técnicamente probada.
- **Confort:** acompañamiento de los movimientos del cuerpo.

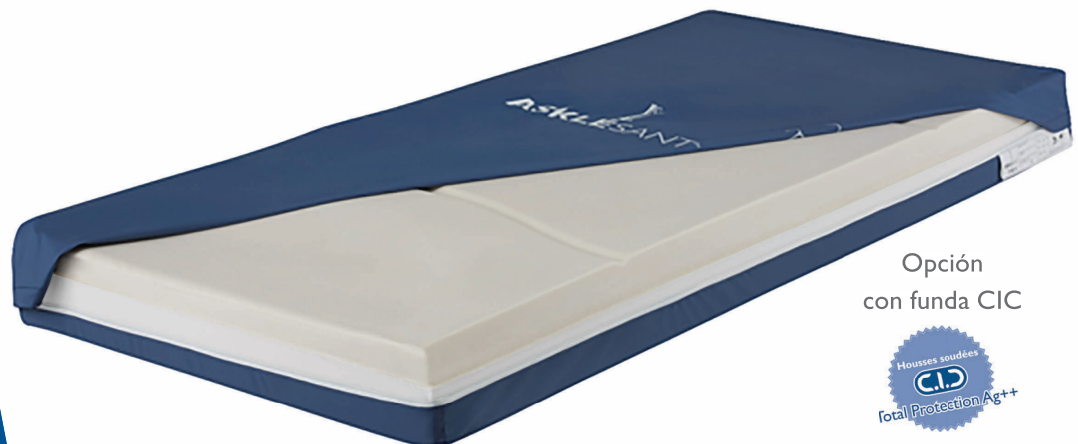

Opción  
con funda CIC



## Colchón multizona con descarga talonera

### Espuma viscoelástica

(Altura 6 cm)  
Densidad 80 kg/m<sup>3</sup>

#### Multizona



Blanda Firme Media

### Firmeza espuma visco

- Blanda: 1'5 kPa
- Media: 1'7 kPa
- Dura: 1'9 kPa

VMA64



VMA63



VMA62




### Peso del colchón

- VMA62: 14 kg
- VMA63: 15 kg
- VMA64: 16 kg

### Base de Espuma Alta Resiliencia



(Altura 8 cm)  
Densidad espuma HR:  
- VMA62: 18 kg/m<sup>3</sup>  
- VMA63: 28 kg/m<sup>3</sup>  
- VMA64: 34 kg/m<sup>3</sup>

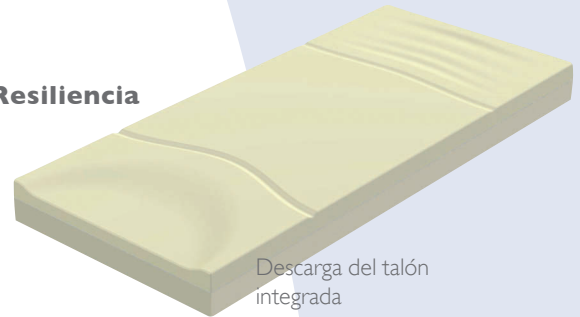

Descarga del talón integrada

- **Reducción óptima de las presiones en las zonas de riesgo.** Gracias a la descarga del talón y a las zonas con firmeza diferenciada.

Ejemplo: reparto de las presiones a nivel del talón en un paciente de 1,76 m y 70 kg. (Unidad: mm de Hg).

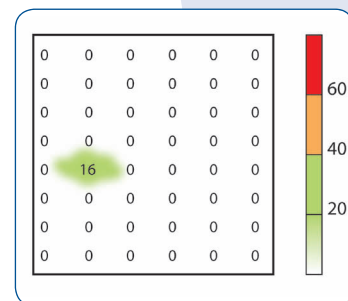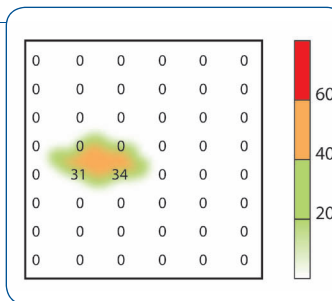

Colchón SIN descarga del talón. Colchón ALOVA monobloc multizona CON descarga del talón.

## PALET BOX

- **Práctico:** los colchones están listos para su empleo.
- **Ecológico:** reduce el volumen de residuos.



## ENROLLADO COMPRIMIDO (RC)

- **Ergonómico:** ligero, fácil de transportar (asa para su transporte).
  - **Ecológico:** aumenta la capacidad de transporte del vehículo.
- Desenrollar antes de fecha indicada en embalaje (Aprox. 6 meses)



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA SEGÚN PRESENTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO			DIMENSIONES (cm)	PESO PACIENTE	NORMAS PROTECCIÓN FUEGO	DENSIDAD
	CAJA	PALET BOX (10 unidades)	ENROLLADO COMPRIMIDO				
<b>ALOVA DT monobloc multizona, funda Promust PU</b>	----	VMA62-HIP3-190	VMA62RC1-HIP3-190 (1 ud)	190x88x14	20 a 120 kg	EN 597-1 et 2 GPEN D I 90 clase D	80 kg/m <sup>3</sup>
<b>ALOVA DT monobloc multizona, funda Promust PU</b>	VMA62C-HIP	VMA62-HIP	VMA62RC1-HIP (1 ud) VMA62RC-HIP (5 uds)	195x88x14	20 a 120 kg		
	VMA62C-HIP3	VMA62-HIP3	----		20 a 150 kg		
	VMA63-HIP	VMA63HIP-BOX	VMA63RC1-HIP (1 ud) VMA63RC-HIP (5 ud) VMA63RC1-HIPH3 (1 ud) VMA63RC-HIPH3 (5 ud)				
<b>ALOVA DT monobloc multizona, funda Promust PU HD</b>	VMA63HIPH	VMA63HIPH-BOX	VMA63RC1-HIPH3	20 a 150 kg			
	VMA64HIPH	VMA64HIPH-BOX	VMA64RC1-HIPH (1 ud) VMA64RC-HIPH (5 uds)	20 a 180 kg			
<b>ALOVA DT monobloc multizona, funda CIC</b>	VMA63CIC	VMA63CIC-BOX	----	20 a 150 Kg			
	VMA64CIC	VMA64CIC-BOX	----	20 a 180 kg			

Mantenimiento  
Promust PU (HD)  
Promust CIC



3 años de garantía.  
En colectividades la garantía de la funda es de 1 año.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España  
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.