

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DÉSIGNATION	X'PRIM 3 COLORIS STANDARD RAL 7035
RÉFÉRENCE	IXN1L PACK COMPRENANT : LIT, PANNEAUX, BARRIÈRES, POTENCE
DIMENSIONS	90CM X 200CM
POIDS DU LIT	64.5 KG SANS ACCESSOIRES, SANS PANNEAUX
AMPLITUDE DE HAUTEUR VARIABLE	34 À 84 CM
RELÈVE BUSTE	75° MAX
RELÈVE JAMBES	VERSION 11 : INCLINAISON DE 12° MAXI PAR CREMAILLERE VERSION 08 : INCLINAISON DE 16° MAXI ELECTRIQUE ET PLICATURE DES GENOUX PAR CREMAILLERE DE 26° MAXI
CAPACITÉ LEVAGE	CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SÉCURITÉ : 170 KG POIDS PATIENT MAXI 135 KG - ACCESSOIRES 15 KG - MATELAS 20 KG
ROUES	Ø 100 MM
NORMES	CEI 60601-2-52 COMPATIBLE AVEC LES ENVIRONNEMENTS D'APPLICATION 3,4 ET 5
OPTIONS	RELÈVE-BUSTE A TRANSLATION / RELÈVE-JAMBES ÉLÉCTRIQUE / RELÈVE-BUSTE CPR FREINAGE CENTRALISÉ / BUTÉE MURALE
MOTORISATION	LINAK - TELECOMMANDE VERROUILLABLE INDICE DE PROTECTION IP54
COMPATIBILITÉ MATELAS	GAMMES : APLLOT®, EPSUS®, ALOVA®, AXTAIR®
ENTRETIEN DÉSINFECTION	COMPATIBLE AVEC : - LES DÉTERGENTS-DÉSINFECTANTS (DD), DESINFECTANTS DE SURFACES (DS) (DERIVES CHLORES ET BASE ALCOOLIQUE <30%) - APPAREILS A VAPEUR TYPE SANIVAP

Marketing et Communication Groupe WINNCARE - Kremand® - Fév 2015

X'PRIM³®



* Lit présenté avec panneaux Médidom coloris Dragonnier Clair

WINNCARE
g r o u p e

SERVICE COMMERCIAL

+33 (0)2 51 98 55 64

Web : www.winnicare.fr


Fabricant

MEDICATLANTIC
GROUPE WINNCARE

CONÇU POUR VOUS



X'PRIM³

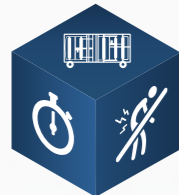

ERGOFIX

- Fixation des panneaux par EASY-MOVE
 - ▶ ERGONOMIE
 - ▶ SÉCURITÉ



- Montage /Démontage du relève-buste du relève-jambes sans outils
 - ▶ ERGONOMIE



- Angle Relève-Buste 75° MAXI
 - ▶ CONFORT
 EN POSITION ASSISE



- Vérin de relève-Buste LINAK LA24 3500 N FUT EN ALUMINIUM
 - ▶ SÉCURITÉ



- Barrières avec fixation par indexation
 - ▶ SÉCURITÉ




- Rondos Traversants pour l'assemblage des 2 demi-Sommiers
 - ▶ SÉCURITÉ



- fixation des passages de câble de télécommande et de vérin relève-buste sur le croisillon
 - ▶ SÉCURITÉ




- Elargissement du croisillon procurant une stabilité latérale
 - ▶ SÉCURITÉ
 - ▶ PERFORMANCE

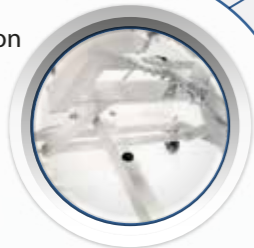


- Empattement de +25 cm par rapport à X'PRIM pour plus de stabilité
 - ▶ SÉCURITÉ




- Boitier de contrôle sur vérin de hauteur variable Diminution des Nuisances SONORES et VIBRATOIRES
 - ▶ CONFORT

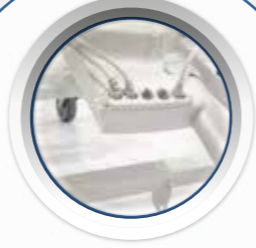

- Vérin fixé avec une goupille facilité de changement
 - ▶ PERFORMANCE

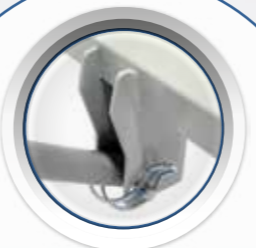

- Interaction du croisillon et de la base par pièces plastiques auto lubrifiées
 - ▶ PERFORMANCE

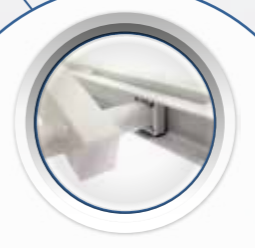

- Pièces Bleues en POLYAMIDE Repères d'aide au Montage/Démontage
 - ▶ ERGONOMIE



MONTAGE / DÉMONTAGE ERGONOMIQUE



FICHE TECHNIQUE

DIMENSIONS: 200 X 90 CM
 AMPLITUDE HV : 34 à 84 CM
 POIDS LIT NU : 64,5 KG
 MOTORISATION : HV 6000 N
 RB 3500 N
 RJ 6000 N
 TCDE VERROUILLABLE

PACK ELECTRIQUE	X'PRIM EVO	X'PRIM3
TÉLÉCOMMANDE (2F/VER.)	HL7X019-02 *	HL7X019-02*
VÉRIN HV	LA27 6000 N *	LA27 6000 N *
VÉRIN R-B	LA27 6000 N *	LA24 3500 N *
BOITIER DE CONTRÔLE	CB6 *	CB6 *
CÂBLE ALIMENTATION	SML912036 *	SML912036 *

* références et appellations LINAK