

BETT PITCHOUNE KALIN



DIESES PRODUKT GENÜGT DEN ANFORDERUNGEN DER EUROPÄISCHEN RICHTLINIE 93/42/EU. ES WURDE GEMÄSS DER NORM CEI60601-2-52

- **An die Morphologie von Kindern zwischen 3 und 12 Jahren angepasstes Bett**, genügt den von der AFSSaPS* (Frankreich) vom 26. April 2010 vorgesehenen sanitären Sicherheitsempfehlungen.
- **Sicherheit:** Gitter mit einem Zwischenraum von weniger als 65 mm.
- **Ergonomie:** Niedrigste Stufe des Bettrostes 300 mm



Mit Platten Pitchoune Kalin weiß/kiwi dargestelltes Bett mit Holzverkleidung und Gitter über die gesamte Länge.

Kinderbett

Funktionalität

Nicht teilbarer Bettrost 160 x 80 cm
 Liegefläche mit verschweißten Metalllatten
 Potenzialausgleichsstecker
 3 elektrische Funktionen
 Amplitude von 300 bis 770 mm
 Elektrische Anhebevorrichtung der Büste
 Elektrische Anhebevorrichtung der Beine mit Beugung der Knie per Zahnstange
 Auf 4 Rädern Ø 100 mm unabhängige Bremsung
 Zentralisierte Bremsung als Option.

Maximale Sicherheit

Der Zwischenraum zwischen den Gitterstangen oder zwei Strukturelementen ist kleiner als oder gleich 65 mm und der Zwischenraum zwischen dem Bettrost und der Basis der Gitterstange ist kleiner als oder gleich 65 mm.

Empfohlenes Bett für ein Kind von einer Größe von unter 146 cm.

Serienmäßige verriegelbare Fernbedienung.
 Anhebevorrichtung der Büste CPR als Option.

Ergonomie

Erleichtert das Aufstehen und den Transfer Bett-Rollstuhl dank der Flachstellung des Bettrostes in einer Höhe von 300 mm.

Ästhetik

2 Plattenausführungen PITCHOUNE KALIN Modell mit weiß lackierten Pfosten, die die Gitterstangen über die gesamte Länge aufnehmen oder Modell öffentliche Einrichtungen für Epoxydstangen mit Schutzbezug für mehr Sicherheit.

Bett für öffentliche Einrichtungen, präsentiert mit Platten Pitchoune Kalin weiß/kiwi, mit zentralisierter Bremsung, Epoxydstangen mit Schutzbezug und Epoxydausleger.




Amplituden: 300 bis 770 mm



An die Welt der Kinder angepasste Platten: Weiß/Kiwi oder Weiß/Parme



Option: zentralisierte Bremsung
 Zugänglichkeit und leichte Aktivierung

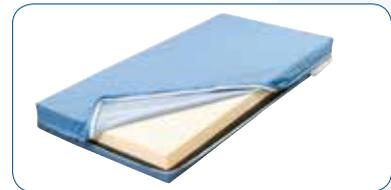

Matratze PEDIA Komfort aus gemischtem viskoelastischem Schaumstoff, geschützt durch einen Bezug aus neutralem, antiallergischem Silikon

TECHNISCHE MERKMALE

BEZEICHNUNG	LPP	ABMESSUNGEN	RB	ANBEVORRICHTUNG DER BEINE	NORMALES NUTZUNGSGEWICHT	RÄDER	NORMEN	MOTORISIERUNG,	
PITCHOUNE KALIN 3 elektrische Funktionen mit Beugung	JA	80 x 160 cm nicht teilbarer Bettrost	70°	40,3° Beugung für die Knie 14,5° Einstellung per Zahnstangen	170 kg Matratzen 20 kg Patient 135 kg Zubehör 15 kg	Ø 100 mm mit Bremsen ohne Fadenschutz		LINAK IP 54	
Zubehör	NEIN	Zusammenklappbare Epoxydstangen mit Schutzbezug (für Platten P306-00)						CEI 60601-2-52	
	NEIN	Platten öffentliche Einrichtung PITCHOUNE KALIN							
	JA	Gitterstangen ganze Länge Holz und Epoxyd (für Platten P305-00)							
	JA	Platten PITCHOUNE KALIN (mit Aussparungen für Gitterstangen gesamte Länge)							
	JA	Matratze Alova PEDIA Komfort 160x80x14 cm für Kinder von 6 bis 12 Jahren							
JA	Matratze Alova PEDIA Komfort 160x80x14 cm für Kinder von 3 bis 5 Jahren								

(1) Normen für Betten mit festen und zusammenklappbaren Kindertragen.

(2) Norm NF EN 1970 und ihre Novellierung über einstellbare Betten für Menschen mit Handicap.

(3) Option Anhebevorrichtung der Büste CPR obligatorisch.

Mechanische, elektrische und Garantie auf die Fernbedienung 5 Jahre*.
 Garantie Platte und Zubehör 1 Jahr*. *Unter normalen Nutzungsbedingungen und ohne Verschleißteile - siehe Nutzungsanleitung.

MÉDICATLANTIC Groupe Winncare - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - Frankreich
 Tel.: +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax: +33 (0)2 51 98 59 07 - E-Mail : info@medicatlantic.com

www.winncare.fr

FP000008



In dem Bestreben der permanenten Verbesserung seiner Produkte behält ASKLE sich das Recht vor, die technischen Merkmale ohne Vorankündigung zu ändern - Fotos nicht verbindlich.

WINN CARE
 GROUP
 by
 MÉDICATLANTIC