

COJINES CON CÉLULAS NEUMÁTICAS Y TELESCÓPICAS **KINÉRIS**



COJINES COMPUESTOS DE CÉLULAS NEUMÁTICAS REGULABLES E INDIVIDUALMENTE DEFORMABLES

- **Precisión:** ajuste exacto a la morfología del paciente gracias al manómetro*
- **Funcionalidad:** reducción al mínimo de las presiones ejercidas sobre la piel y los tejidos gracias al principio neumático ajustable.
- **Eficacia:** limitación de las fuerzas de cizallamiento mediante la adaptabilidad y movilidad de las células.
- **Confort:** acompañamiento de los movimientos por el aire que circula a través de una red calibrada interconectando las células.



* El médico debe asegurarse que el paciente o su entorno puedan hacer los ajustes del soporte. Es necesario que el médico haga las verificaciones oportunas después de 1 mes de uso.


CARACTERÍSTICAS

- Nueva funda de poliéster/PU + elastano:
 - Transpirable
 - Elástico
 - Resistente a la abrasión
 - Resistente al moho y a la luz
 - Lavable a 90°
 - Antiamugas
 - Hipoalergénico (Oeko-Tex® Clase 2)
 - Tratamiento retardante al fuego
 - Parte inferior en tejido antideslizante
- Monocompartimento o bicompartimento para usuarios con trastorno de la estabilidad.
- Múltiples tallas disponibles en anchura y en profundidad de asiento, de 28,5 a 46,5 cm. y dos alturas: de 7 y 10 cm.
- Termoregulación por contacto con el elastano.
- Se suministra con bomba de inflado equipada con un manómetro y una guía de correspondencia de peso/talla/presión.




Manómetro


Fire Retardant Treatment
EN1021-1 & 2

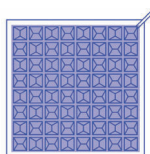

Monocompartimento para usuarios SIN trastorno de la estabilidad.
Altura 7 cm.

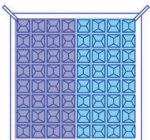

Bicompartimento para usuarios CON trastorno de la estabilidad.
Altura 10 cm.

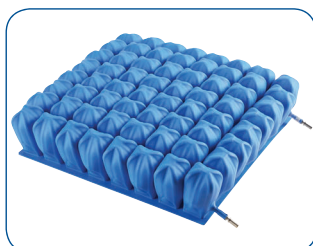

Reparto de presiones en un paciente de 172 cm y 75 kg



Cojín de gel de poliuretano viscoelástico



Cojín de espuma HR (Alta Resiliencia) de 6 cm



Cojín KINÉRIS monocompartimento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| DESCRIPCIÓN | ALTURA DEL COJÍN 7 CM | | ALTURA DEL COJÍN 10 CM | | PESO PACIENTE Kg | DIMENSIONES AxB (cm) |
|------------------------------------|-----------------------|------------|------------------------|------------|------------------|----------------------|
| | 1 VÁLVULA | 2 VÁLVULAS | 1 VÁLVULA | 2 VÁLVULAS | | |
| Cojín KINÉRIS Con dosfundas | V367-1EL | V367-2EL | V3610-1EL | V3610-2EL | de 40 a 55 | 28,5 x 28,5 |
| | V427-1EL | V427-2EL | V4210-1EL | V4210-2EL | de 40 a 45 | 28,5 x 33 |
| | V497-1EL | V497-2EL | V4910-1EL | V4910-2EL | de 50 a 60 | 33 x 33 |
| | V567-1EL | V567-2EL | V5610-1EL | V5610-2EL | de 40 a 65 | 33 x 37,5 |
| | V667-1EL | -- | V6610-1EL | -- | de 50 a 75 | 36 x 36 |
| | V647-1EL | V647-2EL | V6410-1EL | V6410-2EL | de 50 a 75 | 37,5 x 37,5 |
| | V727-1EL | V727-2EL | V7210-1EL | V7210-2EL | de 50 a 85 | 37,5 x 42 |
| | V817-1EL | V817-2EL | V8110-1EL | V8110-2EL | de 55 a 90 | 42 x 42 |
| | V907-1EL | V907-2EL | V9010-1EL | V9010-2EL | de 85 a 120* | 42 x 46,5 |
| | V677-1EL | -- | V6710-1EL | -- | de 55 a 90 | 43 x 36 |
| | V777-1EL | -- | V7710-1EL | -- | de 80 a 110 | 43 x 42 |
| | V107-1EL | V107-2EL | V1010-1EL | V1010-2EL | de 110 a 120* | 46,5 x 46,5 |

* Compatibilidad bajo responsabilidad médica para pacientes pesando hasta 150Kg.

3 años de garantía. En colectividades la garantía de la funda es de 1 año.

Mantenimiento de la funda:



WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.