

LEVE PERSONNE XS 150 - XL 175 - XXL 300

VERTICALISATEUR COMPACT - ELEV UP

SANGLES



LEVE-PERSONNE

- **Adapté** pour les patients de 150, 175 et jusqu'à 300 kg
- **Ergonomique** : ramassage au sol, amplitude d'élévation jusqu'à 1,77 m
- **Robuste** : des matériaux et une motorisation LINAK

VERTICALISATEUR

- **Compact**, maniable et pratique dans un espace réduit
- Pour les transferts en position assise

SANGLES

- **Confort** : une gamme de sangles rembourrées



XS 150, L'ULTRA COMPACT

Pour les patients jusqu'à 150 kg.

Pourquoi choisir un lève personne plus encombrant ?

Le XS 150 correspond à la majorité de la population concernée. Selon l'étude SOLINUT, le poids moyen des personnes âgées est de 65 kg et la taille de 1,60 m.

COMPACT

Ses dimensions réduites lui permettent de circuler là où la plupart des autres lève personnes ne passent pas.

LÉGER

32,5 kg pour un transport aisé, une maniabilité facilitée.

Dimensions:

Hauteur d'élévation 1,65 m.

Le design du XS 150 permet un dégagement suffisant pour un transfert confortable pour des personnes jusqu'à 1,65 m.

IDÉAL POUR LES PETITS ESPACES

Largeur hors tout : 55 cm.

Longueur hors tout : 95 cm.

CONFORT ET SÉCURITÉ

Fléau rembourré d'un matériau lisse, facilement nettoyable et sécurisé par des attaches dotées du système anti-retour.

PRATIQUE

Roues à frein 75 mm, double galet pour plus de maniabilité.



Sur le XS 150, XL 175, XXL 300 et Verticalisateur ELEV UP la batterie est détachable, rechargeable sur le lève personne ou avec un chargeur externe.

- ① Indicateur de charge intégré.
- ② Bouton poussoir d'arrêt d'urgence.
- ③ Descente d'urgence électrique.

XL 175, L'INDISPENSABLE

Pour les patients jusqu'à 175 kg.

PRATIQUE

Léger et compact pour le domicile et la collectivité.

Démontable et facilement transportable.

Maniable grâce aux roues double galet.

Poids : 36 kg.

Rotation du fléau 360°.

ESTHÉTISME

Design moderne et soigné.

Roulettes double galet design.

SÉCURITÉ


Fléau rembourré pour protéger des chocs éventuels.

Attaches de la sangle, dotée du système anti-retour.

Poignées de poussée recouvertes d'une mousse de préhension confortable.



Descente d'urgence manuelle.

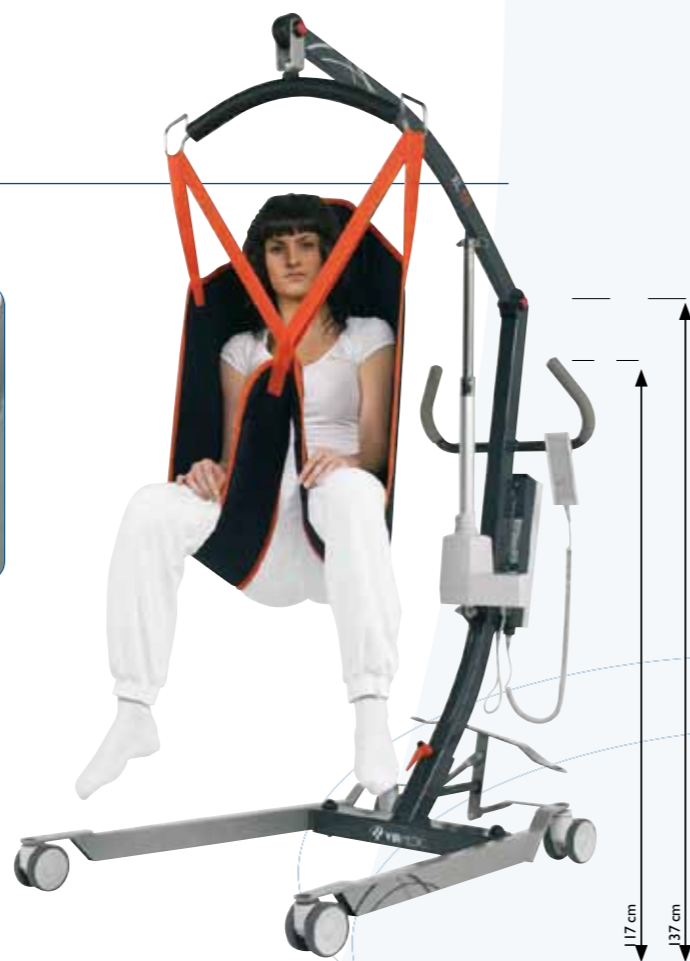

XXL 300

Pour les patients jusqu'à 300 kg.



SÉCURITÉ


Etudié pour une utilisation intensive à l'hôpital, en Ehpad et à domicile.

Le fléau dispose de 4 points d'accrochage. Il est recouvert d'une mousse anti-choc.

Il dispose d'un pack batterie amovible avec témoin de charge et descente d'urgence électrique.

Système d'ouverture des pieds électrique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

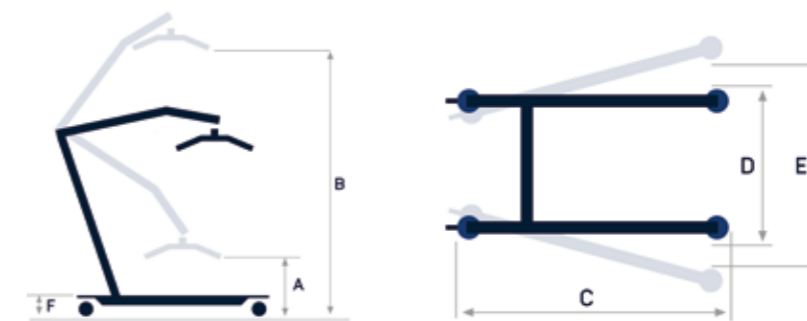

DÉSIGNATION	A CENTRE FLÉAU (SOUS CROCHET)	B CENTRE FLÉAU (SOUS CROCHET)	C	D	E	F	POIDS PATIENT MAX	ROUES AV	ROUES AR	NORMES	MOTORISATION	POIDS EN KG
XS 150	53 (39)	165 (157)	95	55	76	11	150 kg	Ø 75 mm	Ø 75 mm	ISO 10535	LINAK IP54	32,5
XL 175	52 (42)	178 (168)	110	65	84	12	175 kg	Ø 100 mm	Ø 100 mm	ISO 10535	LINAK IP54	36,5
XXL 300	75 (55)	195 (175)	143	64	111	13	300 kg	Ø 80 mm x 2	Ø 100 mm	ISO 10535	LINAK IP54	89,8
Accessoires	Système de pesée classe III médicale, capacité 300 kg.											

VERTICALISATEUR COMPACT ELEV UP


Pour les transferts en position assise.

Idéal pour les petits espaces, largeur hors tout : 62,5 cm.
Nouveau repose-pieds antidérapant et très facile à nettoyer.
Appui tibial réglable en hauteur.
Facilement démontable et transportable.
Poignées de préhension ergonomiques.

LES SANGLES POUR L'ELEV UP




Sangle Polypropylène, lavable à 30°.

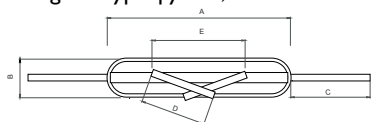

Entretien : 30°



Sangle Peau de Mouton, lavable à 60°.

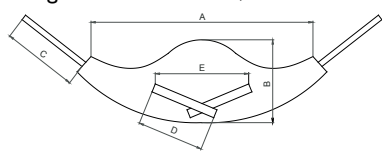

Entretien : 60°



DÉSIGNATION	LONGUEUR PIEDS	LARGEUR HORS TOUT	ÉCARTEMENT	POIDS		POIDS PATIENT MAX	ROUES	NORMES	MOTORISATION
ELEV UP	110	62,5 cm	50,5 - 78,5 cm	40 kg		150 kg	Ø 75 mm		LINAK IP 45 et IP 65
	A	B	C	D	E			NF EN 10535 EN 601-1 EN 601-2	
Sangle Polypropylène	90	35 cm	Max 60 cm	Max 85 kg	40	150 kg			
Sangle Peau de Mouton	90	20 cm	Max 80 cm	Max 35 kg	40	150 kg			

Garantie électrique et mécanique 3 ans, sangles, batterie et télécommande 1 an.

LES SANGLES POUR LÈVE PERSONNE

Utilisateurs de 150 à 250 kg.

La sangle sera adaptée au patient en fonction :

- de sa morphologie (choix de la taille),
- de son handicap (enveloppante ou avec tête),
- du type de transfert (PVC pour des transferts au bain et maille rembourrée pour des transferts du lit au fauteuil).

Chaque sangle dispose de plusieurs boucles d'accrochage pour vous aider à :

- placer le patient dans la position adéquate,
- régler la hauteur du patient,
- repérer la couleur pour accrocher la sangle à la même hauteur de chaque côté.

SANGLE "U"



SANGLE "U" AVEC TÊTIÈRE



SANGLE HAMAC



SANGLE HAMAC

	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm
M	90	95	50	70	40	40	50
L	105	130	55	115	40	40	60

Bain, taille M, L
Poids patient 250 kg

Confort : taille M et L
Poids patient 250 kg

SANGLE "U"

	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	H cm
M	110	105	45	70	40	45	50	20
L	120	115	50	70	40	45	60	20
XXL	170	125	90	75	40	45	60	30

Bain, taille M, L et XXL
Poids patient 150, 250 et 300 kg


Confort : taille M et L
Poids patient 250 kg

SANGLE "U" AVEC TÊTIÈRE

	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	H cm
M	145	100	85	55	25	50	40	20
L	160	105	90	60	25	50	50	20

Bain, taille M, L
Poids patient 250 kg

Confort : taille M et L
Poids patient 250 kg

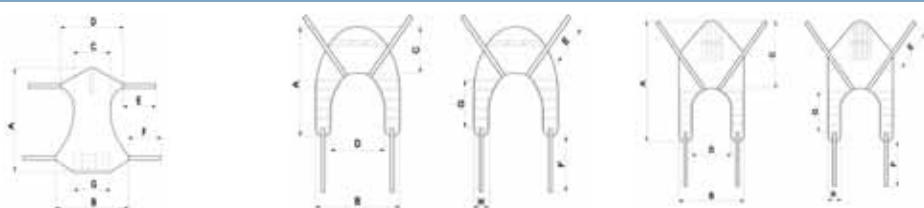

Les parties hachurées sont renforcées pour apporter un meilleur maintien et éviter à la sangle de vriller.

Garantie 1 an.

MÉDICATLANTIC Groupe Winnicare - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - France
Tél : +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax : +33 (0)2 51 98 59 07 - E-mail : info@medicatlantic.com

www.winnicare.fr

Dans un souci d'amélioration constante de ses produits, MÉDICATLANTIC se réserve le droit d'en modifier sans préavis les caractéristiques techniques - photos non contractuelles.

MÉDICATLANTIC

WINCARE