



UNIVERSAL AMPUTEE med hovedstøtte

Til brugere, som er enkelt eller dobbelt benamputeret.

ANVENDELSE

- Anvendes til forflytninger fra siddende og liggende stilling.
- Til forflytninger i mobile og stationære personløftere.
- Anvendes til brugere, som har behov for ekstra støtte omkring hovedet.

EGENSKABER

- Sejlet lægges på siddende fra kørestol/stol eller i liggende stilling fra seng eller badeleje.
- Sejlet giver en god støtte af kroppen, samt stabiliserer bækkenet, og det giver brugeren en oplevelse af stabilitet og tryghed.
- Udstyret med en ekstra blød manchet, som ved behov kan fastgøres rundt om det amputerede ben.
- Sejlet har delte benstropper med speciel stropløsning, som gør, at stropperne ikke skal krydses. Benstropperne har en stor polstret overfalde, som letter preset på hele lårbenet.
- Sejlet giver brugeren en opretsiddende stilling, hvilket medvirker til en korrekt positionering af brugeren.
- Sejlet har en lille sædeåbning.
- Udstyret med en placeringslomme, som letter påsætningen, samt styrestropper i begge sider af sejlet for nemmere forflytning.



SPECIFIKATIONER

SWL: 275 kg

Materiale: Polyester

Størrelser: XS-S-M-L-XL-XXL

VARENUMRE:

Universal Amputee med ekstra benstrop og hovedstøtte, polyester:


	Varenr.	HMI-nr.
XS	009-09753	84998
S	009-09754	84999
M	009-09755	85001
L	009-09756	85003
XL	009-09757	85004
XXL	009-09758	85000

STØRRELSESGUIDE

Løftesejlet er udstyret med en farvet strop på ryggen for angivelse af størrelsen. Samtidig er stroppen en markering af midterlinjen, som sikrer en korrekt placering af sejlet ved pålægningen.

Farvekodens betydning fremgår af størrelsestabellen.

Billedet nedenfor viser gul farvekode, som betyder, at sejlet er i størrelse Medium:

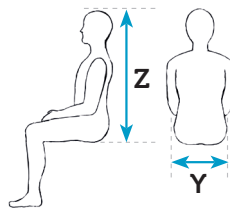

	XS	S	M	L	XL	XXL
Y (hoftemål)	37 cm	42 cm	48 cm	52 cm	68 cm	78 cm
Z (mål fra hoved til bagdel)	75 cm	80 cm	91 cm	100 cm	100 cm	100 cm



For yderligere specifikationer, kontakt [salg@winncare.dk](mailto: salg@winncare.dk). Alle tal og mål er vejledende og kan fravige i visse brugssituationer. Winncare Nordic forbeholder sig retten til ændringer uden forudgående meddelelse.

Billederne kan indeholde tilbehør. Kontakt venligst [salg@winncare.dk](mailto: salg@winncare.dk) for mere info herom.

KONTAKT OS FOR MERE INFORMATION

winncare.com

E-mail: [info@winncare.dk](mailto: info@winncare.dk)

Telefon: +45 70273720

WIN  CARE