

BÁSCULA DE PESO PORTÁTIL

BÁSCULA DE PESO CON DOBLE PERCHA

Para
Residencia de mayores
Asistencia domicilio
Hospitales

La báscula es una pesa M (pesa médicamente aprobada). La báscula está diseñada para pesar el peso corporal de pacientes discapacitados cuando se les coloca en un cabestrillo.

Es una solución portátil muy flexible, que se puede instalar en prácticamente cualquier elevador de fabricante equipado con una barra espaciadora estándar de dos puntos. Además, la correa de montaje y el soporte, fáciles de usar, tienen un ancho ajustable para adaptarse a diferentes tamaños de barra separadora.

La báscula tiene una pantalla grande y múltiples funciones, incluido el botón de encendido/apagado/cero/tara y el botón de retención. La capacidad de pesaje es de hasta 300 kg, pero la capacidad de peso MÁS BAJA decide la capacidad máxima de elevación. La báscula tiene una precisión de 0,1 kg..


Con la función Hold es posible muestrear de 5 a 10 conjuntos de lecturas y analizar la discrepancia.

La función Tara permite restar peso adicional, como ropa, del peso total.

Funciones estándar clave

Botón Encendido/Apagado/Cero/Tara
botón de retención
Gran pantalla
Capacidad de pesaje de hasta 300 kg.
Precisión de 0,1kg



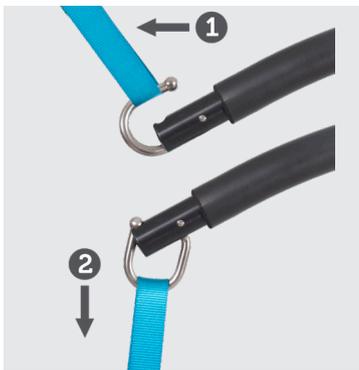

Sling attachment: a minimum of downward pressure locks the sling hook; pull upwards to unlock sling hook.



System mounted on the Luna ceiling hoist.



On/Off/Zero/Tare and Hold buttons




Easy to use and read. Big display.

Version	Item-number
Báscula con doble percha	017-00113

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Height	300 mm
Length	580 mm
Width	51 mm
Weighing unit	MDD class 1
Accuracy	0,1 kg
Weigh capacity	300 kg

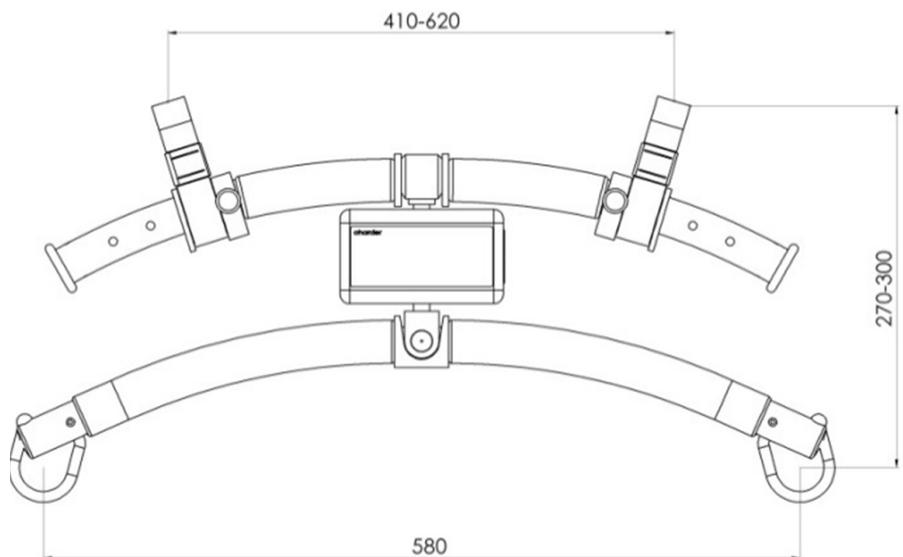

Consult the Technical manual for further specifications. All figures and measurements are for guidance only and may differ in actual situations. Ergolet reserves the right to changes without notice.

Product photos may include accessories. Consult your dealer.

CE MDD93/42/EEC
Class I

date 25.09.2014 - ver. 6

WinnCare Nordic ApS
Taarnborgvej 12C
4220 Korsoer
Denmark
tel. +45 70 27 37 20
e-mail: info@winnCare.dk

www.winnCare.dk

WINNCARE
N o r d i c