



LUNA® X5

JUNTOS ELEVEMOS EL CUIDADO

DISEÑO . SIMPLICIDAD . DURABILIDAD . ECO-DISEÑO



Descubre la LUNA® X5

LUNA® X5 está diseñada para integrarse con **discreción, elegancia y armonía** en cualquier dormitorio. Su concepto todo en uno (fijo, portátil y con capacidad de elevación múltiple) y su **amplio rango de elevación** ofrecen una flexibilidad que sigue el ritmo de sus necesidades cambiantes.

Su diseño **intuitivo** facilita el día a día de cuidadores y equipos técnicos, al tiempo que garantiza la **seguridad y el confort** de los residentes.

Fiable, de bajo mantenimiento, con **costes controlados**, la LUNA® X5 reduce el coste total de propiedad y maximiza el retorno de la inversión. Su exclusivo **diseño ecológico** y sus carriles de **aluminio reciclado** limitan su huella medioambiental.

Características técnicas

Carga máxima de trabajo: 150, 200 o 275 kg

Longitud de la correa de elevación : 2500 mm

Peso : 5,2 kg sin percha

Dimensiones : Ø 320 x H 130 mm

Batería : 36V NiMH | **Cargador :** 100-240V, 0,3A

Carcasa: ABS moldeado con refuerzo

Nivel sonoro:

- Durante el ascenso/descenso en vacío: 49 dB(A)
- Durante el ascenso/descenso con una carga de 175 kg o más: 53 dB(A)

Tiempo de carga: aprox. 5 horas para una carga completa con la batería vacía

Velocidad de subida/bajada

- 42 mm/seg. para cargas de 15 a 275 kg
- 90 mm/seg. para cargas de 0 a 15 kg

Número de ciclos por carga: aprox. 80 ciclos a 90 kg

Clase de protección:

Motor : IPX4 | Mando : IPX7

Vida útil: 20 años o 30.000 ciclos

Garantía de 5 años

Ventajas



Elegante, discreta y adaptable

- ▶ **Sistema todo en uno:** modos fijo y portátil combinados en un solo motor, con capacidad de carga ajustable (150, 200, 275 kg).
- ▶ **Altura de elevación inigualable:** nuevo diseño de motor compacto, con una correa de elevación de gran alcance (2500 mm - permite la elevación desde el suelo).
- ▶ **Compatible con la recarga permanente:** motor siempre cargado y listo para su uso. Puede instalarse en instalaciones ya existentes.



Uso sencillo y seguro, para un cuidado aún mejor

- ▶ **Intuitivo:** botones de parada de emergencia y bajada de emergencia integrados directamente en el mando a distancia, accesibles en cuestión de segundos.
- ▶ **Seguridad integrada:** ganchos de suspensión patentados para una instalación segura de los arneses (los ganchos se cierran automáticamente bajo el peso del residente).
- ▶ **Adopción y supervisión del uso:** software de supervisión de datos de mantenimiento que permite extraer en tiempo real información sobre el uso (paradas de emergencia, descargas, mantenimiento, etc.).



Optimización del coste de propiedad y de su retorno de inversión

- ▶ **Componentes duraderos, de alta calidad y reparables** para aumentar la fiabilidad y minimizar el coste total de propiedad
- ▶ **Mantenimiento inteligente (exclusivo):** gancho y cable del mando a distancia fáciles de sustituir.
- ▶ **Mantenimiento rápido del motor:** en menos de 5 minutos con un solo destornillador.
- ▶ **Indicador de mantenimiento** en el panel lateral.




La 1ª solución diseñada para un impacto medioambiental mínimo

- ▶ **Carriles fabricados con un 75% de aluminio reciclado** postconsumo, lo que reduce la huella de carbono en un 66%.
- ▶ **Motor ecodiseñado.**



Dimensiones


Medidas idénticas en modo fijo y móvil

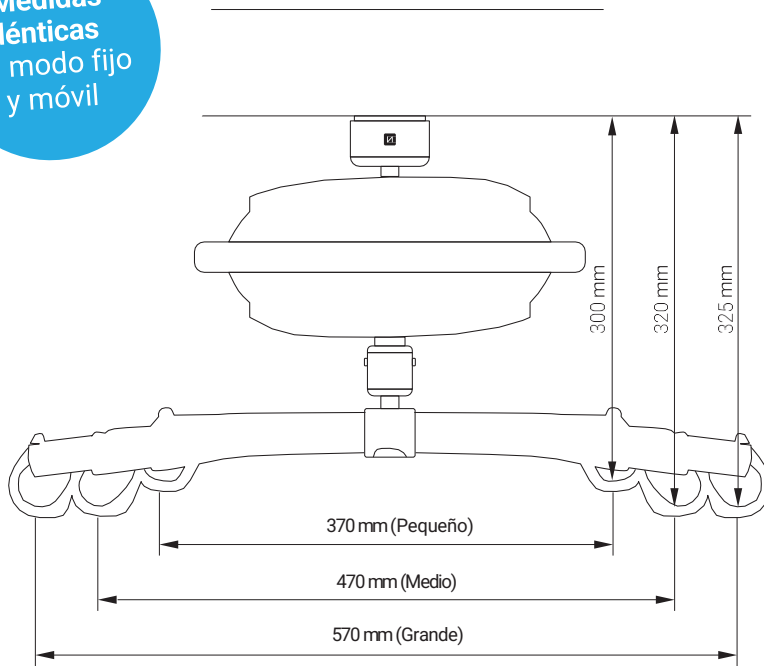

Una nueva generación repleta de nuevas funciones, pero conservando nuestro elegante diseño característico.



Mando a distancia intuitivo, con botón de parada de emergencia integrado y sistema de mantenimiento optimizado.

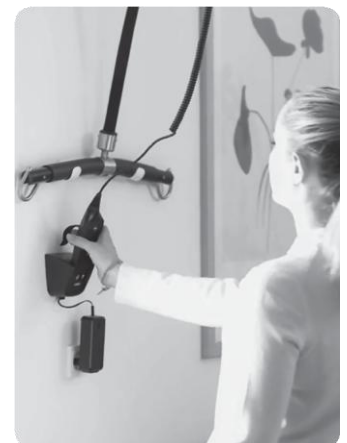

Estación de carga montada en la pared, que garantiza que el mando a distancia permanezca fijo en su sitio mientras se carga el motor.

Referencias

Producto	Referencia
LUNA [®] X5	Item no: 015-03050 UDI: 05740008102836
Mando a distancia de 1 canal LUNA [®] X5 – cable de 1080cm	017-00320
Mando a distancia de 1 canal LUNA [®] X5 – cable de 1320cm	017-00321
Mando a distancia de 2 canales LUNA [®] X5 – cable de 1080cm	017-00322
Mando a distancia de 2 canales LUNA [®] X5 – cable de 1320cm	017-00323
Estación de carga LUNA [®] X5 (con cargador)	017-00300EU
Percha 2 puntos bayoneta - Tamaño S/inclinable/SWL 275/LUNA [®] X5	017-00335
Percha 2 puntos bayoneta - Tamaño M/inclinable/SWL 275/LUNA [®] X5	017-00336
Percha 2 puntos bayoneta - Tamaño L/inclinable/SWL 275/LUNA [®] X5	017-00337
Percha 3 puntos bayoneta - SWL 275/LUNA [®] X5	017-00338
Soporte para Percha - curva - Set con adhesivo LUNA [®] X5	016-02230
Cargador Luna X5/para batería NIMH/30 cell/ 1,8m cable DC/enchufe EU/LUNA [®] X5	017-00302EU