

MARINA ANFI



Silla MARINA ANFI
para facilitar el acceso a playas y piscinas

MARINA ANFI

La Marina Anfi está diseñada para permitir que las personas con movilidad reducida accedan de forma segura a la playa y disfruten del baño en el mar con comodidad, estabilidad y facilidad.

Para usuarios de 30 hasta

Diseñada para soportar de manera segura hasta 130 kg, la Marina Anfi se adapta a una amplia variedad de usuarios, incluidos aquellos con mayor peso corporal o necesidades de movilidad más complejas. Su estructura reforzada garantiza la máxima seguridad, estabilidad y confort tanto en la playa como en el agua.

Peso total de la silla

La Marina Anfi combina resistencia y funcionalidad: fabricada con una estructura anticorrosión de aluminio y acero inoxidable, es lo suficientemente robusta para resistir en entornos exteriores exigentes y, al mismo tiempo, manejable para el transporte y montaje por parte de los cuidadores.

Ø Diámetro de ruedas

Equipada con cuatro ruedas inflables de gran tamaño (Ø 400 mm), la Marina Anfi se desplaza suavemente sobre la arena y entra de forma segura en el mar. Estas ruedas neumáticas de gran volumen proporcionan flotación y absorción de impactos, garantizando un paseo cómodo y estable en terrenos irregulares y aumentando la flotabilidad en el agua.

130 kg

31,7 kg

40 cm



- 1 Empuñadura acompañante
- 2 Respaldo
- 3 Flotador lateral
- 4 Empuñadura usuario
- 5 Asiento
- 6 Reposapiernas
- 7 Tirador
- 8 Estructura
- 9 Ruedas



©Playa de Portocelo, en Marín Ramón Leiro

Beneficios del mar para la salud

El acceso a entornos acuáticos como playas, lagos y zonas costeras –conocidos en conjunto como “espacios azules”– se ha relacionado científicamente con mejoras en la salud física, mental y emocional.



El contacto con el mar favorece la relajación, reduce la ansiedad y contribuye al equilibrio emocional.



El magnesio, el yodo y otros minerales ayudan a mejorar afecciones como el eccema y la psoriasis.



La flotabilidad y la temperatura del agua de mar estimulan la actividad vascular y alivian la presión en las articulaciones.



Pasar tiempo en espacios azules favorece ciclos de sueño más regulares y una mayor sensación de felicidad.



Garantizar el acceso a la playa para todas las personas reduce el aislamiento y fomenta comunidades más inclusivas.



¿Por qué elegir la silla anfibia MARINA ANFI?

- ✓ Diseñada para una accesibilidad total en la playa
- ✓ Robusta pero fácil de manejar
- ✓ Construida con materiales de grado marino
- ✓ Ergonómica y confortable
- ✓ Inclusión universal en acción



Reposabrazos flotantes que permiten una correcta flotación en el agua.



Respaldo, asiento y reposapiés fabricados en malla de poliéster para evacuar agua y arena, ofreciendo mayor ventilación y confort a la persona usuaria.

fabricados en malla de poliéster para evacuar agua y arena, ofreciendo mayor ventilación y confort a la persona usuaria.

Peso de la silla: 31,7 kg



Tirador La silla debe utilizarse siempre con la asistencia de otra persona, respetando las precauciones de seguridad y la normativa vigente.



Ruedas anchas que permiten desplazarse por cualquier terreno y evitan que la silla se hunda en la arena.



Durabilidad

La silla Marina Anfi es resistente a la corrosión, fácil de limpiar y altamente duradera en entornos marinos. Está diseñada para soportar un uso intensivo en instalaciones costeras, playas accesibles y programas de salud pública, con un bajo nivel de mantenimiento.



Versatilidad

Fácil de transportar y montar por uno o dos cuidadores. A pesar de su diseño robusto, no requiere herramientas para su montaje ni para su mantenimiento.




Confort y seguridad

Su diseño garantiza un acceso seguro, cómodo y digno al agua, incluso para pacientes que requieren asistencia.



En conformidad con UNE-EN 12182, UNE-EN 12183, y el Reglamento (EU) 2017/745. Ensayada según ISO 7176-22:2000.

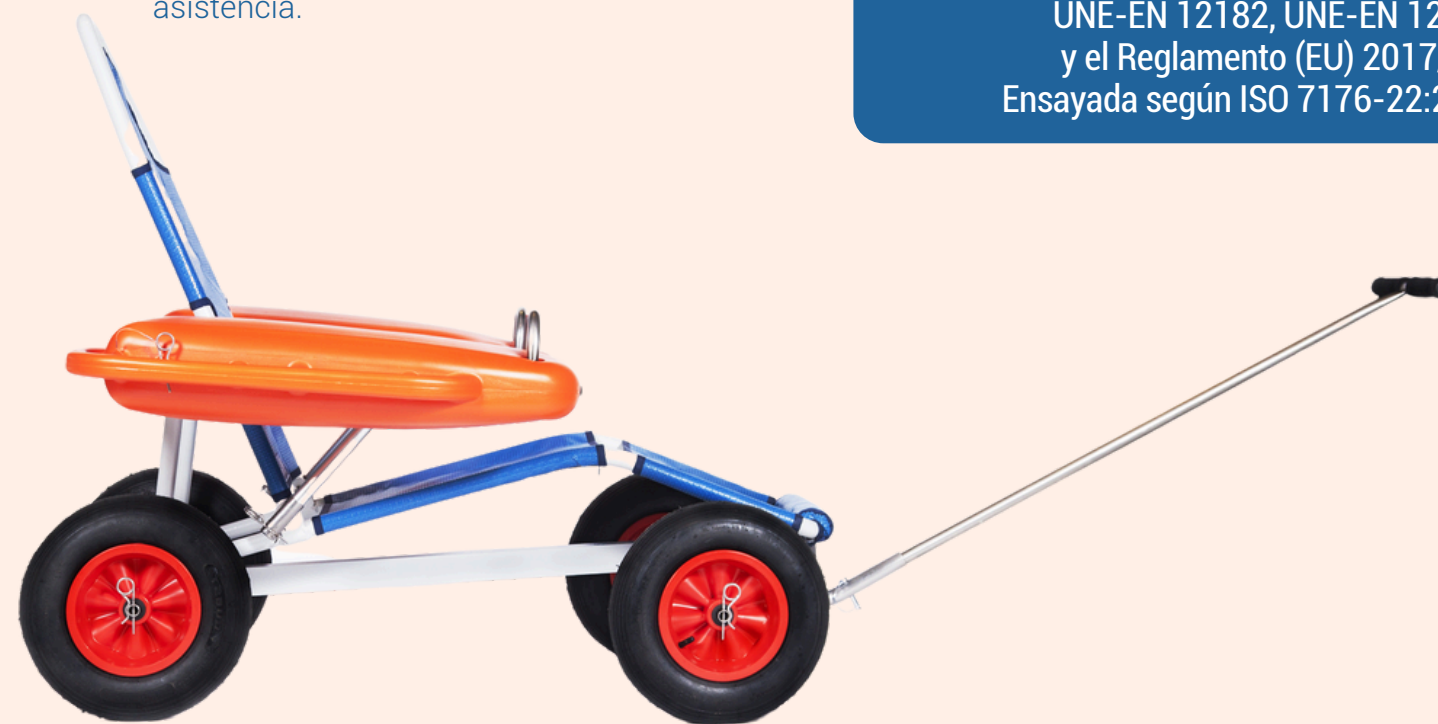

Consulta el manual de usuario para más especificaciones. Fotos no contractuales.

2 AÑOS DE GARANTÍA

Valencia, España

MARINA ANFI



Descubre todos nuestros productos en nuestro sitio web

[WinnCare.es](https://winncare.es)

WIN  CARE

 **WINNCARE Spain**

Carretera Masía del Juez 37B
46909 Torrent, Valencia

05/09/2025